

Andock-Perfusionstisch (mobil) mit Randabsaugung und perforierter Arbeitsfläche für Abluftbetrieb

Beschreibung

Perfusionstisch mit 4-geteilter, perforierter Arbeitsfläche.

Der Tisch muss an eine fest installierte sog. Andockstation (Einfach- oder Doppelstation) andockt werden, die auch die regelbare Abluft zur Verfügung stellt (Anschluss an hauseigenes Abluftsystem).

Das Oberteil des Tisches ist als Wanne ausgebildet. Diese besitzt einen Zentralablauf mit herausnehmbaren Restesieb im Kopfbereich, ansonsten besitzt der Wannenboden keine Aussparung. Im hinteren Bereich des Wannenbodens befinden sich zwei einstellbare Breitstrahl-Spüldüsen. An den Längsseiten der Wanne befinden sich Doppelschlitze, welche die effektive Absaugung gewährleisten. Die Wannenunterseite ist geräuschkämmend beschichtet.

Arbeitsfläche komplett gelocht (Option: im Bereich des Körpers keine Perforation) für einen effektiven Flüssigkeitsablauf in die dafür vorgesehene Wanne bzw. in das herausnehmbare Restesieb mit Gewebe-Produktionseinrichtung. Unterhalb der Wanne befinden sich zwei Revisionsöffnungen.

2 x 230V spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen für Anschluss von Sägen etc. in der Andocksäule enthalten.

Beinfreiheit an jeder Seite des Tisches ca. 250 mm. Vier abdruckfreie Leichtlaufrollen (D=150 mm) mit Fixierung für Geradeauslauf. Gute und leichte und leichte Manövrierfähigkeit



Perfusionstisch mit perforierter Arbeitsfläche und Absaugung nach unten mit Andocksäule



Andock-Perfusionstisch (mobil)

Produkt: Andock-Perfusionstisch mit Randabsaugung
Art.-Nr.: MM-104-0974-00

Technische Daten


- Material: Edelstahl EN DIN 1.4301/ AISI 304 K 320 (alternativ Material auf Anfrage)
- Abluftleistung: 1600 m³/h
- Anschlussleitung: 300 mm Durchmesser
- Maße inkl. Andockstation (L/B/H): 2810 x 900 x 850 mm
- Maße Perfusionstisch (L/B/H): 2060 x 900 x 850 mm

Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland by **Meissner Medical GmbH** gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.



Einfach-Andocksäule
für einen
Präpariertisch

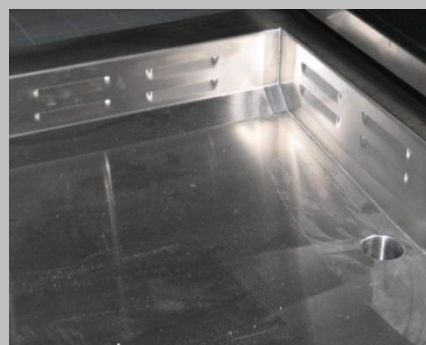

Seiten-Abluftsystem
für gleichmäßige Ab-
saugung über den
gesamten
Körperbereich. Der
Boden ist
vollkommen glatt
und sehr gut zu
reinigen. Das
Eindringen von
Wasser oder
Schmutz wird
verhindert.